

Nr.703

## **Das Geiger-Müller-Zählrohr**

Sara Krieg  
sara.krieg@udo.edu

Marek Karzel  
marek.karzel@udo.edu

Durchführung: 16.04.2019

Abgabe: 23.04.2019

TU Dortmund – Fakultät Physik

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1</b>	<b>Theorie</b>	<b>3</b>
1.1	Aufbau und Charakteristik . . . . .	3
1.2	Totzeit und Nachentladung . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Durchführung</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Auswertung</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Diskussion</b>	<b>5</b>

# 1 Theorie

Das Geiger-Müller-Zählrohr wird verwendet, um die Intensität ionisierender Strahlung zu messen. Dabei werden elektrische Impulse erzeugt, wenn  $\alpha$ -,  $\beta$ - oder  $\gamma$ - Teilchen absorbiert werden. Im vorliegenden Versuch sollen einige Kenndaten eines solchen Zählrohrs experimentell bestimmt werden.

## 1.1 Aufbau und Charakteristik

Der schematische Aufbau ist in Abbildung 1 zu erkennen.

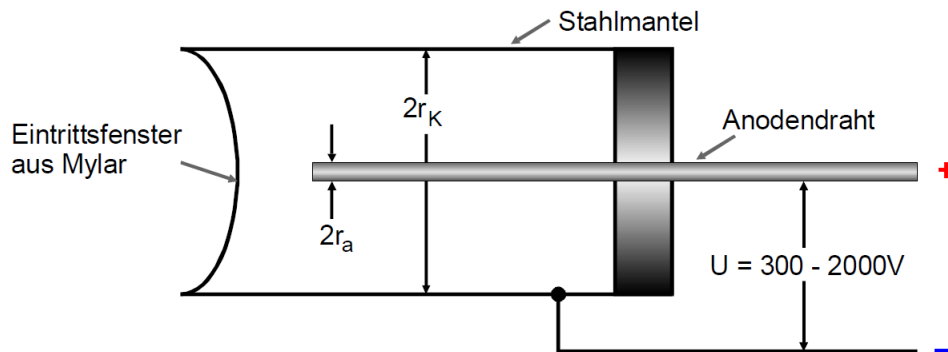



Abbildung 1: Querschnitt eines Endfenster-Zählrohrs [1]

Das Geiger-Müller-Zählrohr besteht aus einem Kathodenzyylinder und einem darin axial verlaufendem Anodendraht. Im Inneren befindet sich ein Gasgemisch. Das Anlegen einer Spannung führt zu einem radialsymmetrischen Feld zwischen Kathode und Anode. Wenn ein geladenes Teilchen in das Zählrohrvolumen eindringt und vollständig absorbiert wird, werden durch Ionisationsakte freie Elektronen und Ionen erzeugt. Die Anzahl der entstehenden Elektronen ist dabei proportional zur Energie des einfallenden Teilchens. In Abbildung 2 ist erkennbar, dass die Zahl der erzeugten Elektronen von der Zählrohrspannung  $U$  abhängt. Es ist möglich, dass diese nicht ausreicht, damit alle Elektronen den Draht erreichen, da viele durch Rekombination verloren gehen (Bereich I).

Der Ionisationsstrom ist bei ausreichender Spannung proportional zur Energie der einfallenden Strahlung. Diesen Bereich bezeichnet man als Ionisationskammer (Bereich II). Durch die geringen Ströme, kann diese Kammer praktisch nur für hohe Strahlintensität eingesetzt werden.

Daran schließt sich der Proportionalitätsbereich (Bereich III) an. In diesem haben die Elektronen eine Energie, die hoch genug ist, durch Stoßionisation ihrerseits ionisieren zu können. Die dadurch erzeugten freien Elektronen können ebenfalls ionisieren. Wegen des Anstiegs der Anzahl der freien Elektronen wird dieser Prozess als Townsend-Lawine bezeichnet. Die gesammelte Ladung  $Q$  ist proportional zur Primärteilchenenergie, sodass das Proportionalzählrohr zur Energiemessung der einfallenden Strahlung geeignet ist.

Eine noch höhere Spannung führt zu dem Auslösebereich (Bereich IV). Die Ladung  $Q$

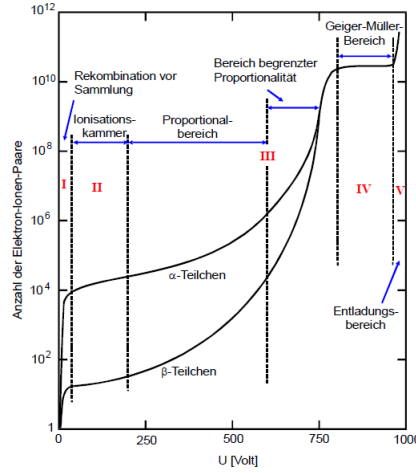

**Abbildung 2:** Detektierte Elektronen in Abhängigkeit von der Zählrohrspannung [1]

ist in diesem Bereich unabhängig von der Primärlonisation, sondern hängt nur noch vom Volumen und der Spannung ab. Durch das Entstehen von ungeladenen UV-Photonen, die sich senkrecht zum E-Feld ausbreiten können, werden so weitere Lawinen im gesamten Zählrohrvolumen ausgelöst. Das Geiger-Müller-Zählrohr kann nur noch für Intensitätsmessung benutzt werden. Der lineare Teil in diesem Bereich wird als Plateau bezeichnet. Die Kenndaten eines Zählrohrs sind die Länge des Plateaus und dessen Anstieg. Je niedriger die Steigung und je länger das Plateau ist, desto hochwertiger ist das Geiger-Müller-Zählrohr.


Wenn die Spannung  $U$  noch weiter erhöht wird, wird durch ein einzelnes Teilchen die Dauerentladung gezündet. Dies zerstört schnell das Zählrohr (Bereich V).

## 1.2 Totzeit und Nachentladung

Nach einer Entladung verbleiben Ionen wegen ihrer größeren Masse länger als die Elektronen im Gasraum und bauen einen sogenannten Ionenschlauch auf. Danach ist für eine Zeit  $T_T$  keine Stoßionisation möglich, da die effektive Feldstärke in Drahtnähe reduziert wird. In diesem Zeitraum können keine weiteren Teilchen detektiert werden. Deswegen wird  $T_T$  als Totzeit des Zählrohrs bezeichnet. Zudem kann der Ladungsimpuls seine ursprüngliche Höhe erst nach vollständiger Neutralisation der Ionen erreichen. Daher schließt sich an die Totzeit die längere Erholungszeit  $T_E$  an. Diese Zeiträume sind in Abbildung 3 dargestellt.

Mit einem Oszilloskop ist es möglich, diese Kurve sichtbar zu machen, sodass die Totzeit  $T_T$  direkt abgelesen werden kann. Außerdem kann zur Bestimmung der Totzeit auch die in Kapitel 3 erläuterte Zwei-Quellen-Methode verwendet werden. Die Totzeit berechnet sich nach

$$T_T = \frac{n_1 + n_2 - n_{1+2}}{2n_1n_2}. \quad (1)$$

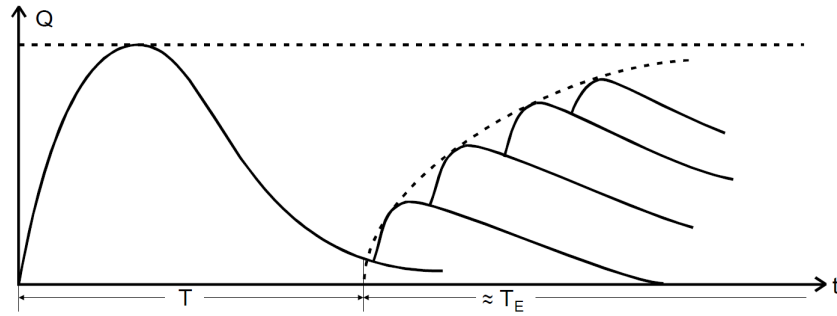


**Abbildung 3:** Qualitative Darstellung der Tot- und Erholungszeit eines Zählrohrs [1]

Die  $n_i$  sind dabei die Impulsraten.

Sogenannte Nachentladungen können während der Erholungszeit stattfinden. Diese entstehen dadurch, dass Ionen beim Neutralisieren am Zählrohrmantel Elektronen herauslösen, welche wiederum neue Elektronenlawinen auslösen. Zum Reduzieren dieser Nachentladung wird dem Gas ein Alkoholzusatz beigemischt, welcher die Ionen im Gasraum neutralisiert. Die positiv geladenen Alkoholmoleküle wandern dann anstatt der Ionen zum Zählrohrmantel und werden dort neutralisiert, ohne weitere Elektronenlawinen auszulösen.

## 2 Durchführung

## 3 Auswertung

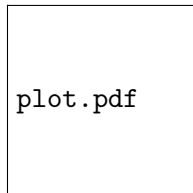

**Abbildung 4:** Plot.

## 4 Diskussion